


NIPLUX

3Dコアフローベルト

取扱説明書

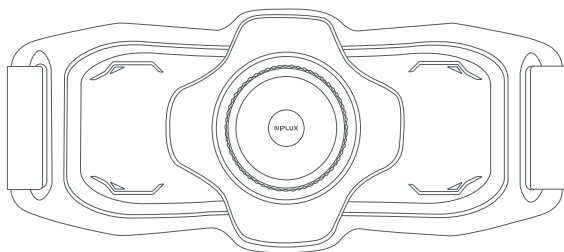

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管してください。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp



公式サイト



操作方法動画

目次

ご使用前に	03
安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	11
充電方法	12
ご使用前の注意事項	14
使用方法	15
オシログラム	19
お手入れ・保管方法	20
商品仕様	21
故障かなと思ったら	22

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

- 本体 1
- ベルト 1
- USB充電コード(type-c) 1
- 取扱説明書兼保証書 1

※デザインおよび仕様については予告なしに変更することがあります。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

警告



必ず守る

次のような方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患のある方
- 血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、高血圧など血圧や血管に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 妊娠中の方
- 出産後3カ月以内の方（出産後は、医師にご相談の上ご使用ください）
- 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 肌に傷や湿疹、はれもののある方
- 体調が優れない方
- 発熱（38℃以上）している方
- 骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性（疼痛性）疾患のある方
- 医療機関で治療中の方
- 骨折、整形などで背中、腹部、腰部に埋め込み手術を受けた方
- 背中、腹部、腰部に病気のある方、または過去にあった方、手術を受けた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害のある方
- 熱さを自覚できない方
- アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎のある方、敏感肌の方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方



警告



腰部のみに使用し、その他の部位（頭部、胸部、心臓周辺）には使用しない。

事故やケガの原因になります。

腰部に薬を塗布した方、湿布を貼っている方、または剥がした直後の方には使用しない。

ケガや肌トラブルの原因になります。

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供の手の届く場所に保管したり、使用させない。ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

●疲労が激しい時 ●飲酒後 ●食前、食後の1時間 ●睡眠中 ●皮膚に異常のある時 ●運転中

事故やケガ、体調不良の原因になります。



警告



必ず守る

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。

●異音●異臭●異常発熱●けむりが出るなど
破損、発火、事故、ケガなどの原因になります。

交流100V~240Vで使用する。
海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

火災や感電、故障の原因になります。



禁止

充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。

故障や事故の原因になります。

充電コードは

- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
- 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させない。
- 収納時に本体などに巻きつけない。
- 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
- 重いものを乗せ、無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
- 傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。

故障や事故の原因になります。

警告

 禁止	定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。
	高温になる場所（火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など）で保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。
	不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。
 必ず守る	取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 事故やケガ、故障の原因になります。
	本製品を使用するときは、腹部および腰部から金属、アクセサリ類などの硬いものは外す。 事故やケガの原因になります。
	製品の上に横になったり、立ったり座ったりしない。 事故や故障の原因になります。
	本体や付属品に破損がないことを定期的に確認する。 使用前に縫製破れがないかを確認し、破れている場合は使用しない。 事故や故障の原因になります。

警告



分解禁止

分解や修理、改造をしない。

火災・感電・ケガ・故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。



必ず守る

お手入れする際は必ず電源を切る。

感電や故障の原因になります。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ず各モードのレベル1、および短時間から使用する。

事故やケガの原因になります。

1回の使用時間は10分までとし、朝晩と時間をしっかり空け、1日最大2回までにする。

長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。

本体内部が高温になる場合があります。

ストーブなど暖房器具の近くで使用しない。

低温ヤケドを起こす恐れがあります。熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。

本体を装着する前、あるいは肌から離す前に必ず電源をオフにする。

通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。




警告


 禁止	他の低周波／高周波医療機器と同時に使用しない。 事故やケガの原因になります。
	通電・温熱部分に破損がないか定期的に確認をする。 事故や故障の原因になります。
	本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や外で使用しない。 また、濡れた身体に使用しない。 事故や故障の原因になります。
	本製品を診断・治療目的で使用しない。 本製品は一般家庭用機器であり、医療機器ではありません。通院や服薬を行っている場合は必ず医師にご相談の上で使用ください。
 必ず守る	本製品を使用するとき、刺激が強いと感じた場合は電源ボタンを長押しして電源をオフにする。または商品を直接外す。 事故やケガ、体調不良の原因になります。

各部の名称とはたらき


本体 [外側]

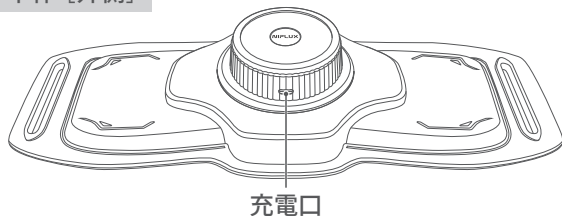

本体 [内側]

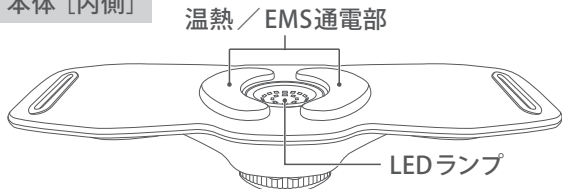

各種ボタン

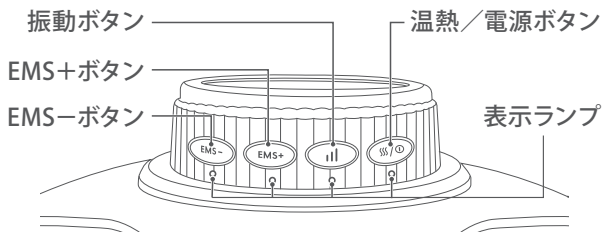

※装着時上から見た図


※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

充電方法



充電残量が少なくなると表示ランプが5回点滅し、「電池残量不足です。充電してください。」と音声アナウンスが流れます。初めてご使用される時や充電残量が減った時は必ず充電してください。充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

1 | 本体、充電コード、ACアダプターを下図のように接続する。

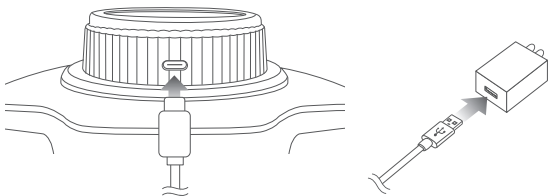

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。


※ACアダプターは付属しておりません。

※出力5V2A以下のACアダプターから充電してください。(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

2 | ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

充電するとモードランプが左から順に点滅します。

※充電しながら本体の電源をオンにすることはできません。

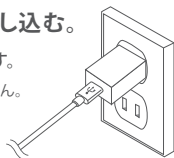

充電方法

| 3 | 充電完了後、壁面コンセントからACアダプターを抜く。

充電が終わるとモードランプが全点灯します。

充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約1.5時間


※電池残量や使用環境、使用するレベルやモードによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

充電池について

- 充電コードを差したまま使用できません。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項

破損・傷がないか確認

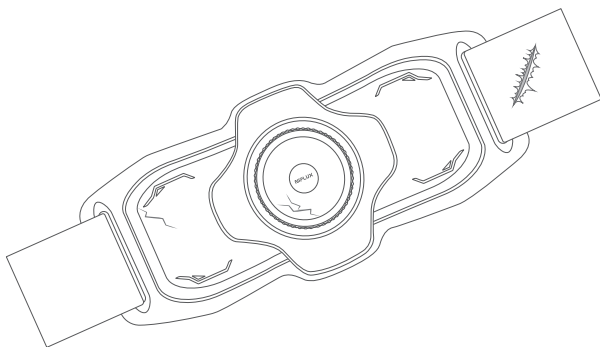


- ご使用前に破損や傷がないか確認してください。破損や傷がある場合は、お肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。


使用方法

1 | 腰に装着する


- ①片側の面ファスナーを固定しベルト部分を腹部に沿って回してつける。

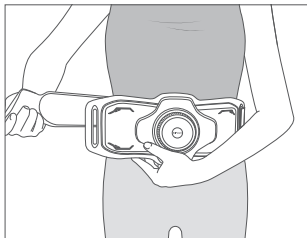

- ②ベルトを本体の穴に通し、引っ張る。

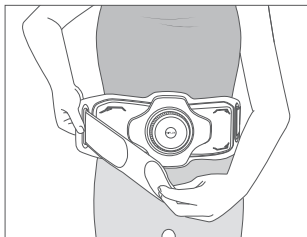


- ③引っ張ったベルトを面ファスナーでしっかり固定。

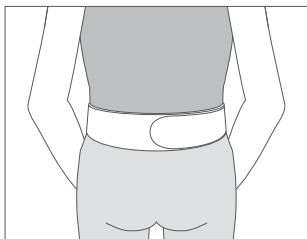

※固定後にフィットしない場合は、両側の面ファスナーをはがして位置を微調整してください。

使用方法

2 「ㄥㄥ/①」ボタンを約2秒長押しして電源をオンにする

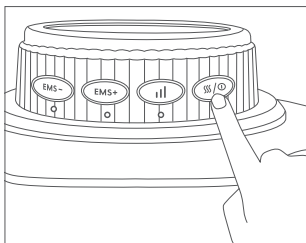

電源がオンになると起動音が流れ、モードランプが点灯します。

※スタート時は振動レベル1、温熱レベル1で動作開始します。

電源を入れて約10分後に自動停止します。

途中で電源を切る場合は、温熱/電源ボタンを長押ししてください。

3 「ㄥㄥ/①」ボタンを押して温熱レベルを選ぶ

温熱/電源ボタンを押すたびに音声ガイダンスが流れ下図の順番でレベルが切り替わります。温熱オフ、温熱レベル1～3からお選びください。




※初めてご使用される方は温熱レベル1からご使用ください。慣れたらお好みに合わせてレベルを調整してください。

温熱レベル	温熱なし	レベル1	レベル2	レベル3
温度		39℃±2℃	42℃±2℃	45℃±2℃

※室温25℃の場合。ご使用環境によって温度は前後します。

使用方法


4 | 「|||」ボタンを押して振動レベルを選ぶ

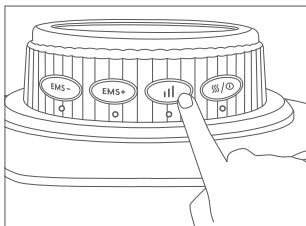

振動ボタンを押すたびに音声ガイダンスが流れ下図の順番で振動の強さが切り替わります。振動オフ、振動レベル1～3からお選びください。



5 | 「EMS-／EMS+」ボタンを押してEMSレベルを選ぶ

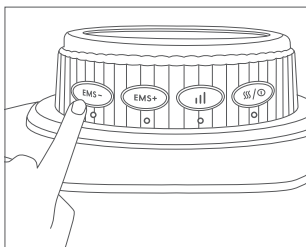

EMS-／EMS+ ボタンを押すたびにEMSの強さが切り替わります。EMSオフ、レベル1～20からお選びください。EMSをオフにする場合はEMS- ボタンを約2秒長押しでも設定可能です。

※初めてお使いになる場合は安全のため必ずレベル1からお試してください。


温熱と振動、EMSは同時にご使用可能です。

※温熱、振動、EMSはそれぞれオフにできます。LEDはオフにできません。

※温熱、振動、EMSをオフにすると約3分で自動的に電源がオフになります。


使用方法

| 6 | 「EMS+」ボタンを長押しして音声のオン/オフを切り替える

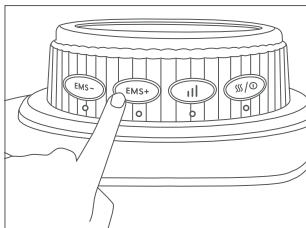

※起動時は音声オンで開始します。
※次回電源を入れたときにも設定が反映されます。

| 7 | 「SSS/①」ボタンを約2秒長押しして電源をオフにする

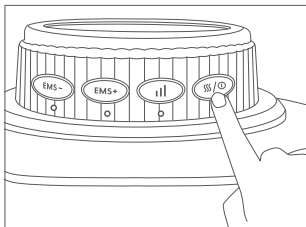

約2秒長押しすると終了音が流れ、運転を停止します。

※10分使用後、自動的に電源がオフになります。

※使用後は必ずお手入れをしてください。

オシログラム

1.923-38.13Hz



お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	3Dコアフローベルト
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約24W (充電時)
セット内容	本体×1 / ベルト×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約390×159×61mm (本体のみ)
化粧箱寸法	約486×205×78mm
重量	810±10g (本体のみ) 875±10g (ベルト含む)
電池容量	2500mAh
使用環境	環境温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%RH～80%RH
製品素材	本体：シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート ベルト：ライクラ生地
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	本体の電源がオンになっていないか確認してください。充電しながらの使用はできませんので、必ず電源を切ってから充電してください。
運転中に停止した	起動してから約10分経過するとタイマー機能がはたらき自動的に運転が停止します。故障ではありません。
音声ガイダンスが鳴らない	EMS+ボタンを長押し、音声がおフになっていないか確認してください。
ピリピリする EMSを感じない	正しく電源が入っていること、衣服などが機器に当たっていないかご確認ください。 衣服などが機器に当たっていないかご確認ください。お肌が乾燥しているとピリつきを感じやすくなります。水やジェルでしっかりと保湿してから使用してください。 (※オイルは通電しないため使用不可)
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。