


# NIPLUX BEROLA

ニップラックス ベローラ

## 取扱説明書

保管用  
保証書付

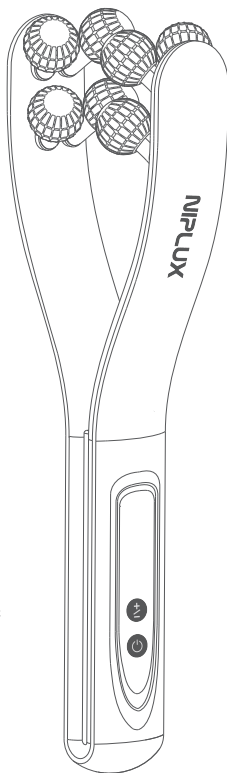

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。



公式サイト



操作方法動画

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ  
[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)

## 目次

|                  |    |
|------------------|----|
| 安全上のご注意 .....    | 03 |
| 各部の名称とはたらき ..... | 10 |
| 充電方法 .....       | 11 |
| 操作方法 .....       | 12 |
| 使用方法 .....       | 14 |
| オシログラム .....     | 15 |
| お手入れ・保管方法 .....  | 16 |
| 商品仕様 .....       | 17 |
| 故障かなと思ったら .....  | 18 |

## 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。  
異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

### ■ 危害・損害の程度を示す図記号

|                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <b>危険</b>  | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。 |
|  <b>警告</b> | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。               |

### ■ お守りいただく内容を示す図記号

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>禁止</b>   | その行為を禁止する内容。   |
|  <b>必ず守る</b> | 実行しなければならない内容。 |

# 危険

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

次に該当する方は使用しない。

事故や肌、身体のトラブルの原因になります。

下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- アレルギー（特に金属アレルギー）体質の方
- 皮膚感染症、皮膚炎などの方
- アトピー性皮膚炎の方
- 敏感肌の方
- 肌に傷や湿疹、はれものなど異常のある方
- 神経障害、皮膚知覚障害の方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 出血性疾患（血友病など）の方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 体調がすぐれない方
- 発熱している方
- 紫斑になりやすい方
- 医療機関で治療中の方
- 体力が極端に衰えた方
- 薬を服用中の方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 飲酒している方
- 疲労の激しい方
- 急性疾患の方
- 悪性腫瘍のある方
- 感染症疾患の方
- 結核性疾患、内臓疾患の方
- 黒皮症の方



禁止

# 警告

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>禁止</p>     | <p>他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。<br/>事故やケガの原因になります。</p> <p>次のような部位には使用しない。<br/>事故やケガ、肌、身体のトラブルの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●傷口</li> <li>●はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位</li> <li>●過度の日焼けなど、肌に異常のある部位</li> <li>●当日、脱毛処理をした部位</li> <li>●背骨など、骨が出っ張っている部分(皮膚が薄い部分)</li> <li>●金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分</li> <li>●指、鼻、耳、唇、眼球、瞼、目の周り、口内、陰部、粘膜、頭部など</li> <li>●膨らんだほくろ、ウイルス性のいぼのある部位</li> <li>●かゆみやほてりのある部位</li> <li>●かつて治療や手術を受けた部位(美容医療施術を含む)や疾患部</li> <li>●刺青(タトゥー)を入れている部位</li> </ul> <p>本体の電源が入った状態で、首に使用しない。<br/>事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> <p>医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。<br/>事故やケガ、体調不良の原因になります。<br/>例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など</p> |
|  <p>必ず守る</p> | <p>子供や身体の不自由な方だけでの使用は避ける。<br/>未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供の手の届かない場所に保管する。<br/>事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> <p>使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、直ちに使用を中止し、医師に相談する。<br/>医師に相談のうえ指示に従ってください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# 警告



禁止

乳幼児やペットには使用しない。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。

取扱説明書に記載されている用途以外には  
本製品を使用しない。  
ケガや本体が故障する原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。  
ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タ  
コ足配線にしない。  
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

ヒビやメッキ剥がれ、ローラーの動きが悪いなど  
機器に不具合がある場合は使用しない。  
事故やケガの原因になります。



必ず守る

本体、付属品に次のような異常、故障を発見したと  
きは、直ちに使用を中止し本体の電源を切る。充電  
中の場合はコンセントからACアダプターを抜く。

- 異音
- 異臭
- 異常発熱
- けむりが出る など

破損や発火、事故やケガの原因になります。

充電コードは付属品を使用する。  
出力が高い充電コードを使用すると、故障や事故の原因  
になります。

本体を使用しないとき、掃除するときは必ず  
電源を切る。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

# 警告

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>必ず守る</p>   | <p>立って使用する場合は、転倒しやすい場所は避け、周囲の状況に十分注意する。</p> <p>万が一、ショックを受けた場合に、転倒によるケガの原因になります。</p> <p>交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。</p> <p>火災、感電、故障の原因になります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p>禁止</p>    | <p>充電コードについて</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●傷んでいるとき、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。</li><li>●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。</li><li>●重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。</li><li>●濡れた手で抜き差ししない。</li></ul> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p> <p>本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。</p> <p>火災や感電、ケガの原因になります。</p> <p>高温になる場所（火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内）や埃のある場所で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。</p> <p>事故や部品の変形、故障の原因になります。</p> <p>不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたりぶつかけたりしない。</p> <p>ケガや本体が故障する原因になります。</p> |
|  <p>分解禁止</p> | <p>分解や修理、改造はしない。</p> <p>火災、感電、ケガの原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 警告



充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。

事故やケガ、故障の原因になります。

ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。

部品の変形、故障の原因になります。

本体および付属品をアルコール、ベンジン、シンナー、除光液などの溶剤で拭かない。

故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。

レベルは少しずつ調整してください。EMSを感じない場合、まずはお肌をしっかり保湿してご使用ください。

作動中は同じ箇所当て続けない。

ヤケド、発熱などの原因になります。必ず本体を適度に動かしながら、1部位合計5分以内を目安に使用してください。

使用時には本体を強く押しあてたり、早く動かしたりしない。過度に1カ所に集中して使用しない。

ケガや本体が故障する原因になります。痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

使用中は金属や他の電気製品に接触させない。

ケガや本体が故障する原因になります。

フェイスパックをつけたまま使用しない。

本製品は防水仕様ではありません。故障の原因になります。

# 警告



必ず守る

開閉部で手を挟まないようにする。

ケガ、故障の原因になります。

使用中に熱いと感じたら、すぐにローラーを肌から離す。

熱いと感じたまま無理に使用を続けるとヤケドの原因になります。

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げるか、部位をずらして使用する。また、常に肌がしっかりと保湿された状態で使用する。

そのまま使用すると、肌を痛める原因になります。

(オイルは使用できません。)

歯の治療中の方や歯に詰め物(金歯、銀歯など)がある方は、使用を控えるか部位をずらして使用する。

歯の治療中は、頬やあごに強い刺激や不快感を感じる場合があります。強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。

使いはじめや慣れるまでは、必ずレベル1で使用する。

事故やケガをする原因になります。慣れてからレベルを調整してください。

金属、アクセサリ類(ネックレス、イヤリング等)は外してから使用する。

事故やケガの原因になります。


必ずメイクを落として使用する。

メイク崩れや、肌トラブルの原因になります。


## 各部の名称とはたらき

## 本体

●正面

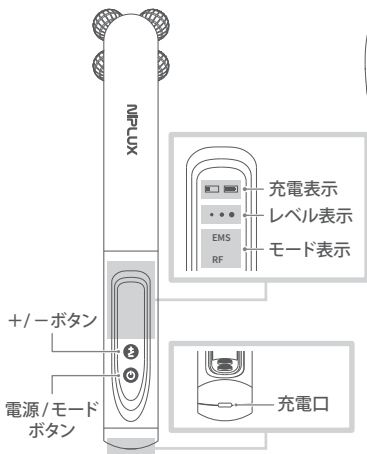

### ●横面

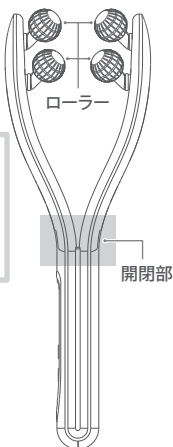

付属品



USB充電コード (type-c)



取扱説明書兼保証書

# 充電方法

初めて使用するときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電してください。充電残量が不足すると充電表示の左側が赤色に点灯します。



赤色点灯

## ① 付属の充電コードを本体に差し込む

※ACアダプターは付属していません

## ② 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む (充電表示右側が緑色点滅)

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)



## ③ 充電完了後充電コードを取り外す (充電表示右側が緑色点灯)

### ● 充電時間の目安

| 充電時間 | 動作時間    |
|------|---------|
| 約3時間 | 約1時間40分 |

使用時の環境や充電環境、ご使用のモード・レベルによって大きく前後する場合があります。

# 操作方法


## ！ 注意 NOTICE

EMSの感じ方は個人差があります。  
万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪く  
なったりした場合は直ちに使用を中止して  
ください。

### 1 | 本体の ボタンを短押しして 電源をオンにする

電源がオンになると「ピ」と音が鳴り  
液晶画面が表示され、  
**EMSモード・レベル1**で動作を開始します。


※電源を入れてから約10分後に自動  
停止します。途中で電源を切る場合  
は  ボタンを長押ししてください。

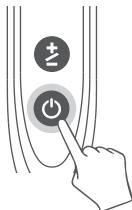

### 2 | ボタンを短押しして モードを選択する

 ボタンを短押しするたびに「ピ」と  
音が鳴り、**EMSモード**と**RFモード**が  
交互に切り替わります。

※モードを切り替えるとレベルは1に  
リセットされます。

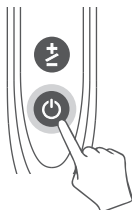

| EMSモード                                                                                                                                       | RF (ラジオ波) モード                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>電気が筋肉を<br/>刺激します。</p> <p>※EMSの刺激により<br/>温かさを感じます。</p> |  <p>電磁波が<br/>お肌を深部まで<sup>※</sup><br/>温めます。</p> <p>※角質層まで</p> |

# 操作方法

## 3 | +/− ボタンを短押しして レベルを選択する

+/− ボタンを短押しすると「ピ」と音が鳴り、  
レベル1〜3から選択できます。



| レベル表示 |       |       |
|-------|-------|-------|
| ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| レベル1  | レベル2  | レベル3  |


※初めてご使用される方はレベル1からお試しいただき、慣れたらお好みに  
合わせてレベルを調整してください。

※EMSモード使用時はレベルの変化に驚かれないよう、お肌につけた状態  
でのレベル調整がおすすめです。

## 4 | 電源ボタンを長押しして 電源をオフにする

電源ボタンを長押しすると「ピー」と  
音が鳴り、液晶画面の表示が消えます。

約10分使用後、「ピピピ」と音が鳴り  
自動的に電源がオフになります。  
使用後は必ずお手入れをしてください。

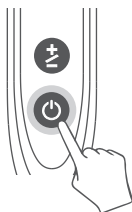

# 使用方法

## ！ 注意 ● NOTICE

作動中は同じ箇所当て続けしないでください。発熱、ヤケドの原因になります。必ず適度に動かしながら、1部位合計5分以内を目安にご使用ください。

### 1 | 化粧水でお肌を保湿する

※オイルは電気を通さないためオイルフリーの化粧水等で保湿してください。

※本製品は防水仕様ではありません。  
浴室での使用やフェイスパックをしたままでの使用はしないでください。



### 2 | フェイスラインをローラーで挟み、上下にローリングする

お好みのモード・レベルを選択して、上下にゆっくりとローリングしてください。

※髪が長い方は髪を束ねた状態で使用するなど、ローリングの際に開閉部に髪の毛を挟まないようにご注意ください。




### 3 | 腕や足など気になる部位を挟み、上下左右にローリングする

左右4つずつローラーがあるため、上下左右に動かすことができます。

お好みのモード・レベルを選択して、丁寧にローリングしてください。

※注意事項をよく読み、使用出来ない部位をご確認ください。

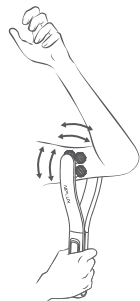

# オシログラム

EMS レベル1



0-91KHz



EMS レベル2



0-91KHz



EMS レベル3



0-91KHz



RF レベル1



0-330KHz



RF レベル2



0-330KHz



RF レベル3



0-330KHz



# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

## 保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品（本体）はリチウムイオン電池を使用しています。  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

## 商品仕様

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| ブランド  | NIPLUX (ニップラックス)                |
| 品名    | BEROLA (ベローラ)                   |
| 定格電源  | DC 5V 2A                        |
| 消費電力  | 約15W(充電時)                       |
| セット内容 | 本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1 |
| 電池容量  | 1300mAh                         |
| 本体寸法  | 約283×95×47mm                    |
| 化粧箱寸法 | 約311.5×118.5×63.5mm             |
| 重量    | 本体:約243g                        |
| 使用環境  | 環境温度 5℃～40℃ / 相対湿度≤80%RH        |
| 製品素材  | 本体:ABS、PC、メッキ                   |
| 生産国   | 中国                              |

# 故障かなと思ったら

| Q        | A                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 充電ができない  | 出力電圧が強すぎる可能性があります。<br>ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。                                                        |
|          | 充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。他の充電コードやACアダプターで充電をお試しください。                                                   |
|          | 充電口に付着物がないか確認してください。                                                                                     |
|          | C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。必ず指定の充電コードをご使用ください。また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。 |
| 電源が入らない  | 充電中は使用できません。<br>充電コードを外して再度電源を入れてください。                                                                   |
| 運転中に停止した | 起動してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。                                                      |
| EMSを感じない | お肌が乾燥している可能性があります。<br>しっかりお肌を保湿してください。<br>オイルは電気を通さないため、化粧水やオイルを含まないフェイスクリーム等でお肌を保湿してください。               |