


# NIPLUX

## EMS EYE LIFT

### 取扱説明書

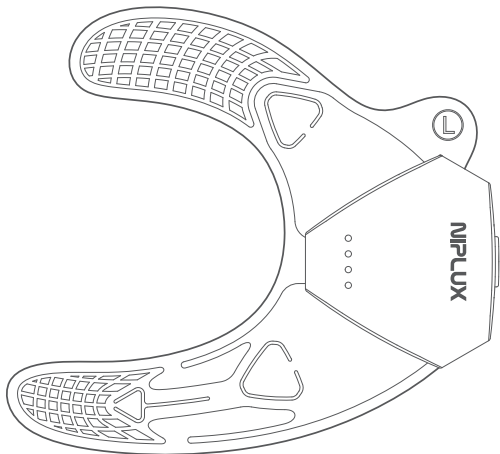

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)



公式サイト



操作方法動画

# 目次



安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	10
充電方法	11
ご使用前の注意事項	13
使用方法	14
オシログラム	19
お手入れ・保管方法	20
商品仕様	21
故障かなと思ったら	22

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

## ■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

# 危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

# 警告



禁止

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。  
事故やケガの原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

乳幼児やペットには使用しない。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。



必ず守る

子供や身体の不自由な方だけの使用は避ける。

未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供の手の届かない場所に保管する。

事故やケガの原因になります。  
子どもが製品で遊ばないようにご注意ください。

# 警告



必ず守る

次のような方及び場合には医師と相談して使用する。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方●心臓疾患、障害及びその疑いのある方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●疾患により発熱している方●骨折、捻挫、肉離れなど急性[とう(疼)痛性]疾患の方●血圧に異常のある方、血液疾患や血栓のある方及びその疑いのある方●医師から運動を禁じられている方●安静を必要とする方●妊娠中の方、出産直後の方●薬を服用中の方●通院中の方●かつて治療や手術を受けたところ(美容医療施術を含む)、または疾患部へ使用する方●白内障や緑内障など眼病をお持ちの方●充血、網膜剥離など目に異常や疾患がある方●体力が極端に衰えた方●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●導電性の金属などを埋め込んである部位に使用する方●歯の治療中の方、歯に詰め物がある方、インプラントを装着している方●神経障害、皮膚知覚障害のある方●接触性皮膚炎など皮膚に既往症のある方●アレルギー体質、敏感肌の方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。  
医師に相談のうえ指示に従ってください。



禁止

次のような場合や部位には使用しない。  
事故やケガ、肌・身体のトラブルの原因になります。  
●皮膚炎、やけど、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などお肌に異常がある場合およびその部位●かゆみやほてりのある部位●心臓の周辺部位、首、眼球、まぶた、口内、陰部、粘膜など●膨らんだほくろ、ウイルス性のイボのある部位●当日脱毛処理をした部位●刺青(タトゥー)を入れている部位●飲酒後や疲労の激しい場合●運転中

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
目元以外には使用しないでください。事故やケガ、故障の原因になります。

# 警告



必ず守る

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。

●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど  
破損や発火、事故やケガの原因になります。

交流100V~240Vで使用する。

海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。  
火災、感電、故障の原因になります。

本体(特に充電端子)に水やホコリが付着していないことを確認してから充電する。  
感電やショートによる火災などの原因になります。



禁止




付属の充電コード以外は使用しない。付属の充電コードを他の製品に使用しない。  
故障や事故の原因になります。

充電コードは ●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。  
●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。  
●収納時に本体などに巻きつけない。  
●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。  
●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。  
●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。  
ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

# 警告

 <p>水場禁止</p>	<p>本体および充電コードを水で濡らさない。 浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管、使用しない。 加熱したり、火中に投下したりしない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。 本体や付属品を無理に折り曲げたり、重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>本体および付属品の端子に他の金属を接触させない。 ショートによる故障の原因になります。</p>
	<p>使用中は金属や他の電気製品に接触させない。 ケガや本体が故障する原因になります。</p>
	<p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形、故障の原因になります。</p>
 <p>分解禁止</p>	<p>塗薬(スプレー式などを含む)や目薬と併用はしない。 体調不良や、目や肌のトラブルの原因になります。</p>
	<p>分解や修理、改造をしない。 火災、感電、ケガ、故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>



# 警告



必ず守る

使用しないときやお手入れする時は必ず電源を切る。  
感電や故障の原因になります。

本体や付属品に破損がないことを定期的に確認する。  
事故やケガの原因になります。破損がある場合はご使用をお控えください。

コンタクトは必ず外してから使用する。  
目のトラブルの原因になります。

メガネや金属類、イヤリングなどのアクセサリー類を外してから使用する。  
事故やケガの原因になります。

必ずメイクを落とし、しっかりと保湿した状態で使用する。  
肌トラブルの原因になります。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。  
事故やケガの原因になります。

1回5分の使用で週2～3回、1日1回を目安に使用する。  
連続使用は避け、5時間以上は使用間隔をあける。  
長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。  
1日2回以上のご使用はお控えください。

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、EMSレベルを下げて使用する。  
そのまま使用すると、肌を痛める原因になります。



# 警告




必ず守る

立って使用する場合は、転倒しやすい場所は避け、周囲の状況に十分注意する。  
万が一、ショックを受けた場合に、転倒によるケガの原因になります。

本体を肌に取り付ける前、あるいは肌から取り外す前に必ず電源をオフにする。  
通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。


# 各部の名称とはたらき

## 本体(表) ×1組(2個)

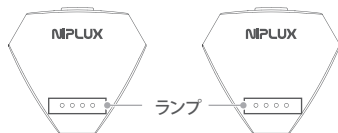


※左右の区別はありません。


## 本体(裏)

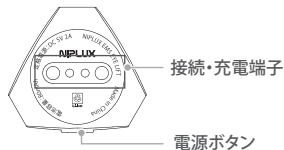

## ジェルパッド ×2組(4枚)

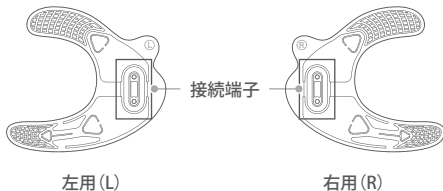

## 付属品

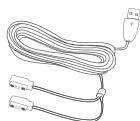

USB充電コード



取扱説明書兼保証書

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 充電方法




初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。



充電残量が減ると、4つのランプが同時に点滅します。

※充電切れになると、電源ボタンを長押ししてもランプが点滅し、電源が入らなくなります。

## 1 | 下図のように接続して充電する

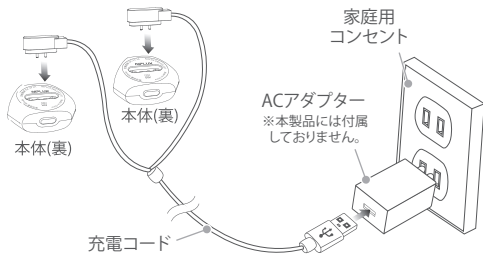

※充電しながら本体の電源をオンにすることはできません。

※充電コードの本体接続側はマグネットタイプです。端子にホコリや水分が付着していないか確認して本体の充電端子に接続してください。

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。


(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

# 充電方法

## | 2 | 4つのランプが全て点灯に変わると充電完了

※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

**充電中** 順に点滅を繰り返す

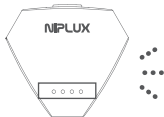

**充電完了** 4つのランプが点灯



## | 3 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す

### 充電時間の目安<sup>※</sup>



充電時間  
約2時間



フル充電で  
約6時間使用可

※使用環境や充電環境、使用するモード・レベルによって  
充電時間や動作時間は大きく異なります。

#### ● 充電池について

- 充電コードを差したまま使用できません。
- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

# ご使用前の注意事項

## 破損・傷がないか確認



- ご使用前に本体やジェルパッドに破損や傷がないか確認してください。  
破損や傷がある場合はお肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、再度取扱説明書をよく読み、  
機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- 目薬や目元に塗り薬を使用した場合は、その後しばらく経ってからご使用ください。
- 目元パックやフェイスパック、ピーリングケアアイテムなどとの併用はお控えください。
- ご使用前にアクセサリーなど金属類は外してください。
- お肌に異常がないかよく確認してからご使用ください。
- ご使用後発しん(疹)や発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。



EMSの感じ方は個人差があります。万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

# 使用方法

## | 1 | 化粧水でお肌を保湿する


- ※しっかり保湿された清潔なお肌にご使用ください。
- ※オイルは電気を通さないためオイルフリーの化粧水等で保湿してください。
- ※お肌が乾燥しているとジェルパッドの粘性低下の原因になります。
- ※本製品は防水仕様ではありません。  
浴室での使用やフェイスパックをしたままでの使用はしないでください。



## | 2 | ジェルパッドをお肌に貼りつける

R/Lの表示を確認し、目元にジェルパッドの形を添わせるように左右それぞれ貼りつけてください。

- ※ジェルパッドを正しく使用、保管した場合は最大で15回程度使用可能です。
- ※片方ずつでもご使用いただけますが、快適なご使用のために左右一緒にご使用いただくことをおすすめいたします。
- ※ジェルパッドが貼ってあるフィルムは保管の際に使用するため捨てないでください。

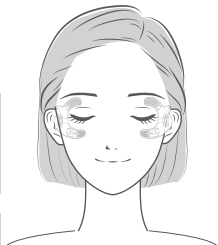



ジェルパッドが次のような状態の場合は、使用せずに他のジェルパッドに交換してください。

- ・汚れがひどく、清潔でない
- ・変形している
- ・破れや傷がある
- ・粘着が弱い
- ・目立つしわがある
- ・ジェルパッドが土台からずれている

# 使用方法

## | 3 | ジェルパッドに本体を取り付ける

ジェルパッドと本体裏の接続端子を合わせて、取り付けてください。

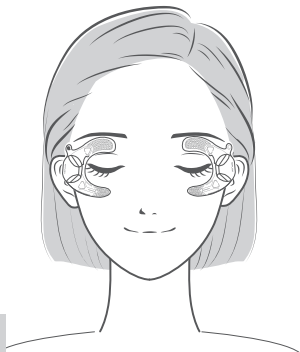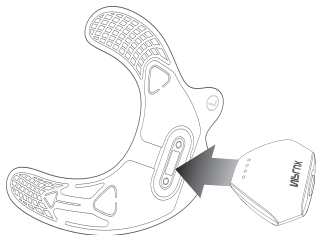

- ※本体は向き、左右の区別はありませんが、上図の方向で本体を取り付けると容易にボタン操作を行えます。
- ※本体およびジェルパッドの接続端子にホコリや水分が付着していないことを確認してください。

# 使用方法

## | 4 | 電源ボタンを約2秒間長押しして電源をオンにする

左右それぞれ電源を入れてください。

電源がオンになるとランプが点灯し、レベル1で動作を開始します。



※電源を入れてから、約5分後に自動停止します。

途中で電源を切る場合は、電源ボタンを長押ししてください。

# 使用方法


## | 5 | 電源ボタンを短押ししてEMSレベルを選ぶ

レベル1～4からお選びください。

レベルに応じてランプが順に点灯します。

初めてご使用される方はレベル1からお試しいただき、慣れたらお好みに合わせてレベルを調整してください。

電源ボタンを短押し

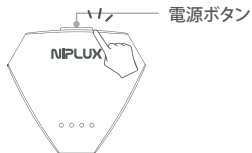

ランプ1



レベル  
1

ランプ2



レベル  
2

ランプ3



レベル  
3

ランプ4



レベル  
4


※充電残量が減ると4つのランプが点滅するため、選択中のレベルが確認出来なくなります。

# 使用方法

## | 6 | 電源ボタンを約2秒長押しして電源をオフにする

使用中に停止する場合は、電源ボタンを長押しして電源をオフにしてから取り外してください。

※約5分使用后、自動的に電源が切れます。

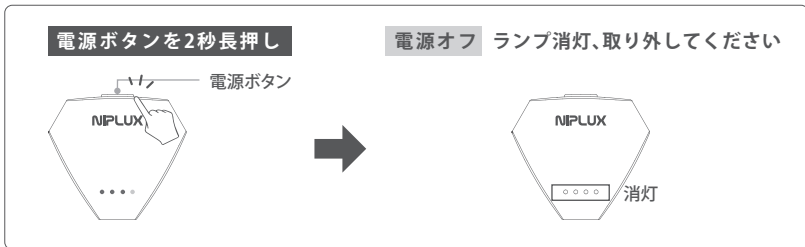


使用終了後は必ず電源をオフにして本体をお手入れしてください。  
ジェルパッドはフィルムに貼り、袋に戻してください。  
お手入れ後はパッケージ箱に戻し、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。

# オシログラム

EMS レベル1

[ 10-50Hz ]

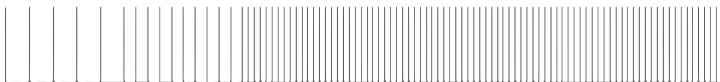

EMS レベル2

[ 2-10 Hz ]



EMS レベル3

[ 20-1000 Hz ]



EMS レベル4

[ 20-40 Hz ]



# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- ジェルパッドの汚れは、水を含ませよく絞った布やウエットティッシュなどで拭き取ってください。  
接続端子は水で濡らさないようご注意ください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

## 保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# 商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	EMS EYE LIFT (EMSアイリフト)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約0.3W(充電時)
セット内容	本体×1組 / ジェルパッド×2組 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約31×34×12mm (本体1個分の寸法)
化粧箱寸法	約180×160×50mm
重量	本体:約17g
電池容量	80mAh
使用環境	環境温度-10~70℃ / 相対湿度20~70%RH
製品素材	ABS、PC、PET、シリコーン
生産国	中国

# 故障かなと思ったら

Q	A
充電ができません	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。
	ACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターで充電をお試しください。
	充電端子に付着物や錆び、破損がないか確認してください。
	一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、 ACアダプターでの充電をお試しください。
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。
運転中に停止しました	起動してから、約5分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。