


NIPLUX

FASCIALAX専用充電台

取扱説明書



公式サイト

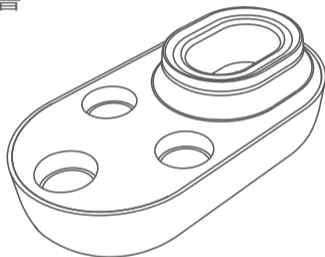

保管用

保証書付き

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズは、皆様の健康をプラス。詳しくは公式サイトへ www.niplux.jp

各部の名称


※本製品を濡らしたり、乱暴に扱わないでください。

真上



アタッチメント設置台

裏面

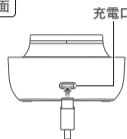


充電口

ご使用方法

① FASCIALAX本体の電源を切ります。

② FASCIALAX本体付属の充電コード
(Type-Cコネクター側)を充電台の
充電口に差し込みます。

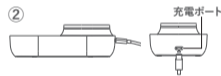

③ 充電コードのUSB端子を本体付属の
ACアダプターに接続し、コンセントに差し込みます。

④ FASCIALAX本体を充電台にしっかり垂直に差し込みます。

⑤ FASCIALAX本体と充電台が正しく接続された場合、充電台
のランプが点滅し、充電を開始します。
また、FASCIALAX本体の3つの充電残量表示ランプが全て点
灯したら充電完了です。
充電完了後はACアダプターをコンセントから抜いてください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	FASCIALAX専用充電台
定格電源	DC 5V 2A
電源供給元	ACアダプター / モバイルバッテリー
本体寸法	約163 × 88 × 53 mm
化粧箱寸法	約167 × 93 × 55 mm
重量	本体:約150g
製品素材	本体:ABS / パッケージ:紙
セット内容	本体(充電台)×1 / 取扱説明書兼保証書×1
使用環境	環境温度-2-40℃ / 相対湿度≦90%RH
生産国	中国