


# NIPLUX FASCIALAX

## 取扱説明書

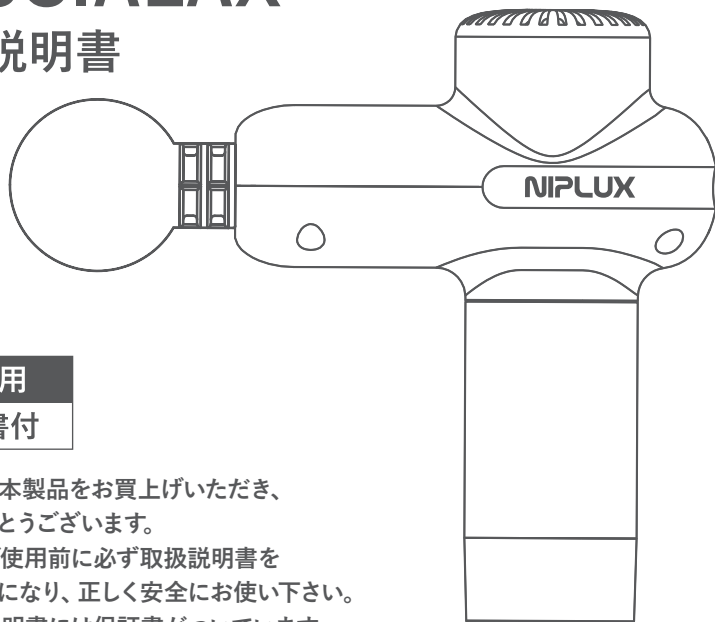

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

※本品には専用の別売り充電台があります。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)



公式サイト



操作方法動画

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

## 目次

|           |    |
|-----------|----|
| ご使用の前に    | 03 |
| 安全上のご注意   | 04 |
| 各部の名称     | 12 |
| 充電方法      | 13 |
| ご使用方法     | 16 |
| お手入れ・保管方法 | 20 |
| 商品仕様      | 21 |
| 故障かなと思ったら | 22 |

# ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## セット内容

- 本体 (ファシアラックス) ..... 1台
- USB充電コード (type-c) ..... 1本
- ACアダプター ..... 1個
- アタッチメント ..... 6個
- 取扱説明書兼保証書 ..... 1部
- 収納ケース ..... 1個



※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。  
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。  
異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

|   |  |
|---|--|
|  <b>危険</b> | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。 |
|  <b>警告</b> | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。               |

## ■お守りいただく内容を示す図記号

|   |              |   |                |
|---|--------------|---|----------------|
|  <b>禁止</b> | その行為を禁止する内容。 |  <b>必ず守る</b> | 実行しなければならない内容。 |
|---|--------------|---|----------------|

# 安全上のご注意

## 危険



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。  
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
  - 人工心肺など生命維持用医用電子機器
  - 心電計などの装着型医用電子機器

## 警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。  
ケガや体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。  
ケガや体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。  
例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など



## 警告

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 肌に傷や湿疹、はれものなど異常のある方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- 発熱している方
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が曲がっている方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害
- アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方



必ず守る

## 警告



必ず守る

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。  
医師に相談のうえ指示に従ってください。

腹部や胸部、頭部、首、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には使用しない。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。

次のような時は使用しない。

●疲労が激しい時 ●食前、食後の1時間 ●飲酒後 ●睡眠中  
事故、ケガ、体調不良の原因になります。

子供に使用させない。本製品で遊ばせない。  
ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。



禁止

乳幼児や自分の意思表示できない方には使用しない。  
また乳児や子供の手の届くところで使用、保管しない。  
事故やケガ、体調不良の原因になります。

本製品の専用アタッチメント以外に装着して使用しない。  
事故やケガの原因になります。

付属品や本体差込口、すきま、通気孔などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。



## 警告



禁止

ACアダプターや充電コードについて

- 傷んでいるとき、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。
- 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
- 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
- 充電コードを抜く時は、先端を持ち、コードを引っ張らない。
- 濡れた手で抜き差ししない。

感電、ショート、発火、事故の原因になります。

収納時に充電コードを本体などに巻きつけない。

コードに負担がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

本体および付属品を水につけたり、水洗いしない。

また、濡れた身体に使用しない。

感電、ショート、発火、故障などの原因になります。



必ず守る

充電をする際は必ず付属のACアダプターと充電コードを使用する。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損、発火の原因になります。

万一、異常が発生したら、本体の電源をすぐに切る。

充電中の場合は、コンセントからACアダプターをすぐに抜く。




感電、火災、ケガの原因になります。

交流100V～240Vで使用する。

海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

火災、感電、故障の原因になります。

# 警告

|   |  |
|---|--|
| <br>禁止    | <p>動作時間が極端に短いなどバッテリーの劣化が見受けられる場合は、無理に使用しない。</p> <p>感電、火災、ケガの原因になります。</p>                               |
|   | <p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。</p> <p>ACアダプターは、壁のコンセントに直接差込み、タコ足配線をしない。</p> <p>ケガや本体が破損、故障の原因になります。</p> |
|   | <p>高温になる場所（火のそば、こたつ、布団、直射日光の下や炎天下の車内など）で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。</p> <p>発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。</p>   |
|   | <p>不安定な場所で保管しない。</p> <p>また、本体や付属品を落としたり、ぶついたりしない。</p> <p>ケガや本体が破損、故障の原因になります。</p>                      |
|   | <p>使用中、本体の通気孔をふさがない。</p> <p>発火や事故、故障の原因になります。</p>  |
| <br>水場禁止  | <p>浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。</p> <p>感電、火災、ケガの原因になります。</p>  |
| <br>分解禁止 | <p>分解や修理、改造をしない。</p> <p>発火や事故、故障の原因になります。</p> <p>修理は弊社カスタマーサービスへご相談ください。</p>                           |

## 警告



必ず守る

1回の使用時間は10分以内を目安とする。  
また、同一方所への連続使用時間は3分以内を目安とする。  
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、ケガをまねくことがあります。  
なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間は1時間以内にして  
ください。最低30分間以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。  
本体が熱くなって、故障の原因になります。  
また、本品は10分間の連続使用で自動オフになります。

初めは短い時間で使用する。  
強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。



禁止

本体の電源オン/オフを5分間に3回以上繰り返さない。  
バッテリー寿命が消耗し、故障の原因になります。

説明書に記載されている用途以外には、絶対に使用しない。  
また、他の按摩機器等と併用して使用しない。  
事故やケガ、故障の原因になります。

肌の弱い方は素肌で使用しない。また、顔には使用しない。  
肌を傷める原因になります。

強く押し付けて使用しない。  
事故やケガ、皮膚や筋肉を傷める原因になります。



## 警告



必ず守る

使用中は髪や指などが巻き込まれないようにする。

事故やケガの原因になります。

本体は必ず手に持って使用する。


本体の上に乗ったり、座ったりして使用しないでください。

転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

本製品を使用する時は、アクセサリ類を外す。

事故やケガの原因になります。

## 各部の名称

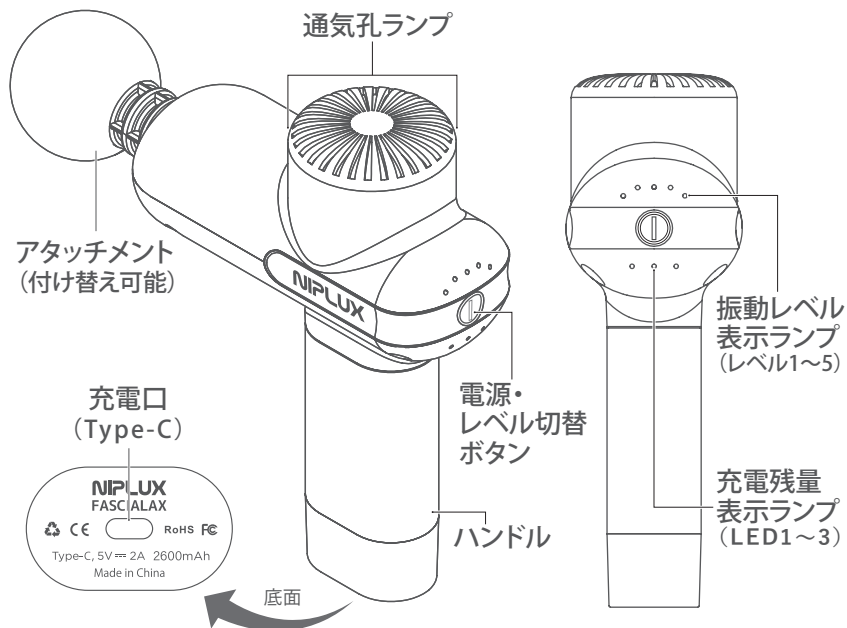

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。  
※本品には専用の別売り充電台があります。

# 充電方法

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(充電残量表示ランプが点滅時は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

## ● 充電時間の目安

| 充電時間 | 動作時間   |
|------|--------|
| 約5時間 | 約2.5時間 |


## ● 充電残量ランプについて



- ※充電推奨温度は15℃~35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電出来ない場合があります。
- ※電池の残量充電環境および使用環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後する場合があります。
- ※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電使用を繰り返すと正常に戻ります。
- ※動作時間が極端に短いなどバッテリーの劣化が見受けられる場合は、無理に使用しないでください。
- ※充電完了後は充電コードを必ず抜き、コードを差したまま電源を入れないでください。
- ※高温多湿や直射日光の当たる場所は避けて充電を行ってください。

## I 本体底面の充電口に、付属の充電コードの Type-Cコネクタ側を接続する。


- ※端子の形が一致するように、差し込んでください。
- ※充電コードの先端が本体充電口から3mm程度浮き、完全に入っていないように見えることがありますが、商品の仕様であり、性能には問題ございません。

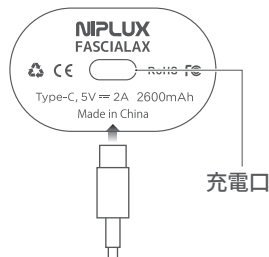

# 充電方法

## 2 図のように充電コードをACアダプターのUSBポートに接続する。

※充電する際は必ず付属のACアダプターを使用してください。  
付属のACアダプターの出力は5V2Aです。  
2Aを超えるアダプターを使用すると故障の原因になります。

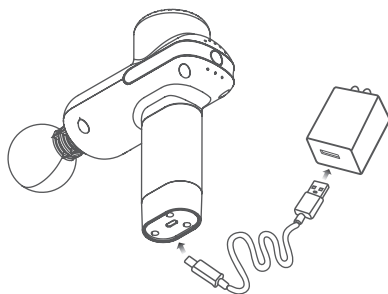


## 3 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

●赤色充電残量表示ランプが順に点灯し、充電を開始します。  
また充電中、通気孔の青いランプが点滅します。

※充電残量表示ランプや通気孔ランプ  
がつかない場合は、正しく充電が  
できていません。充電方法の手順に  
したがって正しく接続できているか  
ご確認ください。

※充電中は、本体の電源をオンにし  
ないでください。

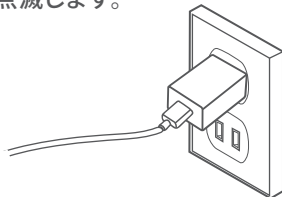

## 充電方法

- 4 充電が完了したらACアダプターをコンセントから抜く。  
(3つ目の赤い充電表示ランプと、通気孔ランプが点灯します。)

### 充電池について


- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- 電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# 温熱アタッチメントご使用方法

## 各部の名称

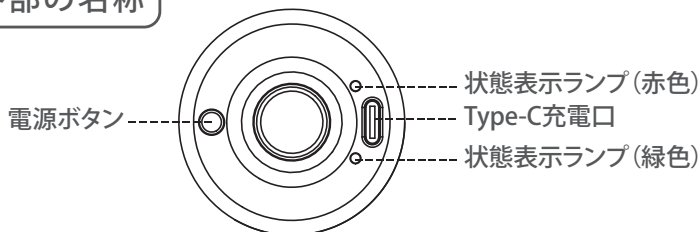


## ご使用方法

### 1 | 電源オン/オフ

電源ボタンを約1秒間長押しすると、緑色ランプが点灯し、ヘッド表面部分を約55℃まで急速加熱します。


また再度、電源ボタンを約1秒間長押しすると、加熱が停止します。

また起動から約10分間で自動的に電源がオフになります。

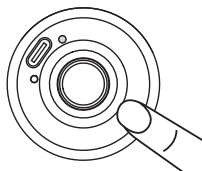

### 2 | 赤色ランプについて

バッテリー残量が少ない場合、赤色ランプが点灯します。充電中は赤色ランプが点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

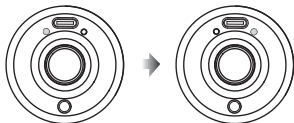


**警告**

定格5V2Aを超えるアダプターを使用しないでください。  
故障や事故の原因になります。

# ご使用方法

- 1 電源がオフになっていることを確認して、アタッチメントを取り付ける。  
※奥までしっかりと差し込んでください。

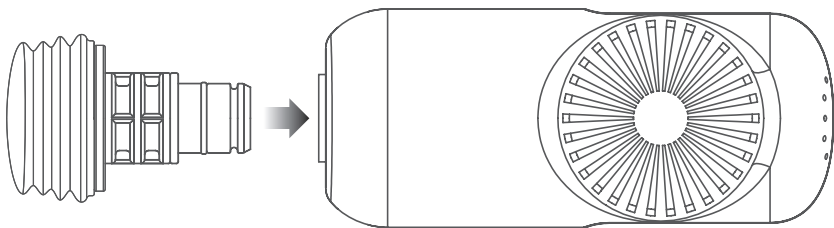

## アタッチメント使用例



### 円柱型

足裏や関節など、ピンポイントで深く刺激。



### 平型

ふくらはぎなど、身体のあるゆる部位を平面で刺激。



### 緩衝型

柔らかめの刺激で、肩などの筋肉に。



### 平型温熱

身体のあるゆる部位を平面の温熱で刺激。



### 球型

太腿、臀部、後部など大きな筋肉に。




### U字型

前腕や脊柱、アキレス腱の両側など、細めの筋肉に。

# ご使用方法

## 2 電源・レベル切替ボタン(⓪)を約2秒間押して電源をオンにする。

※振動レベル表示ランプが1つ点灯し、振動レベル1から開始します。  
また、通気孔ランプと充電残量表示ランプも同時に点灯します。

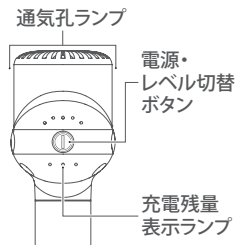


## 3 (⓪) ボタンを押して振動レベルを選ぶ。

※ボタンを押すたびに、振動レベルが1レベルずつ上がります。振動レベルは、5段階(レベル1~5)から選べます。振動レベル表示ランプの点灯数で、どの振動レベルに設定されているかを確認することができます。

(例) 振動レベル表示ランプが3つ点灯している場合、振動レベル3に設定されています。

| 振動レベル | 1分あたりの回転数 |
|-------|-----------|
| 1     | 2,100回    |
| 2     | 2,300回    |
| 3     | 2,500回    |
| 4     | 2,700回    |
| 5     | 3,200回    |

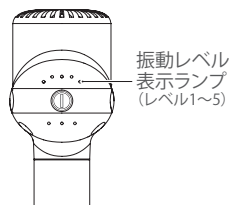

## ご使用方法

### 4 ハンドル部分をしっかりと手で持ち、肌に軽く当てて使用する。

※1回の使用時間は10分以内を目安としてください。

また、同一箇所への連続使用は3分以内を目安としてください。

※「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

### 5 使用中に振動を停止するには、(Ⓜ) ボタンを約2秒間押す。

※振動レベル5の状態から、(Ⓜ) ボタンをもう1回短押しして停止させることもできます。

なお、停止させた直後の2秒間は電源が完全に切れておらず、充電残量表示ランプは点灯したままです。

この点灯状態の2秒間にもう一度、(Ⓜ) ボタンを短押しすると、振動レベル1から本体が再度起動します。

※使い始めから10分間経った場合も、自動的に電源がオフになります。

## お手入れ・保管方法

- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 本体およびアタッチメントの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布を浸し、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。アタッチメントのストッパーゴム部分にオイル等が付着していると、アタッチメントが外れやすくなる場合があります。ストッパーゴム部分も同様に拭き取ってお手入れしてください。
- アタッチメント差込口付近にオイルがにじみ出ることがありますが、機器内の潤滑油によるもので、本体の異常ではございません。乾いた布などで拭き取ってお手入れをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体およびアタッチメントのお掃除をしてから、付属の収納ケースに保管してください。

## 商品仕様

|       |  |
|-------|--|
| ブランド  | NIPLUX (ニップラックス)   |
| 品名    | FASCIALAX (ファシアラックス)   |
| 定格電源  | DC 5V 2A   |
| 消費電力  | 約28W (充電時)   |
| セット内容 | 本体×1 / USB充電コード×1 / ACアダプター×1<br>アタッチメント×6 / 取扱説明書兼保証書×1 / 収納ケース×1 |
| 本体寸法  | 約181×139×60mm  |
| 化粧箱寸法 | 約290×78×230mm (※アタッチメントは除く)  |
| 重量    | 本体:約570g   |
| 電池容量  | 2600mAh  |
| 使用環境  | 環境温度-2~40℃ / 相対湿度≤90%RH  |
| 製品素材  | ABS/シリコン/PC  |
| 生産国   | 中国   |

## 故障かなと思ったら

| Q         | A   |
|-----------|---|
| 充電ができない   | ACアダプターの出力電圧が強すぎる可能性があります。ACアダプターは付属のものを使用してください。   |
|           | ACアダプターまたは充電コードの故障の可能性があります。同じ規格の他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。  |
|           | 充電口に付着物や破損がないか確認してください。   |
|           | CtoCの充電コードでは充電できない場合があります。必ず指定の充電コードをご使用ください。<br>また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。 |
| 動作しない     | 電源ボタンを長押ししてレベル表示ランプが点灯したら再度電源ボタンを短押しし、レベルを選んでご使用ください。   |
| 肌に当てると止まる | 充電が不足しています。充電を満タンにして再度ご使用ください。  |
| 勝手に電源が切れる | 起動してから10分経過するとタイマー機能が働き、自動的に運転が停止します。故障ではありません。   |