


# NIPLUX

## 温熱アタッチメント

### 取扱説明書

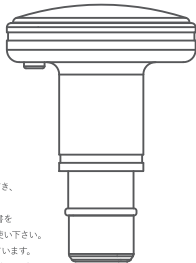

公式サイト 操作方法動画

保管用


保証書付き

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズは、皆様の健康をプラス。詳しくは公式サイトへ [www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)

### 各部の名称

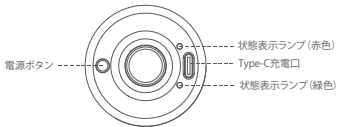

### ご使用方法

#### 1 | 電源オン/オフ

電源ボタンを約1秒間長押しすると、緑色ランプが点灯し、ヘッド表面部分を約55℃まで急速加熱します。また再度、電源ボタンを約1秒間長押しすると、加熱が停止します。起動から約10分間で自動的に電源がオフになります。



#### 2 | 充電方法

バッテリー残量が少ない場合、赤色ランプが点灯します。充電口に充電コードを接続し、充電を行ってください。充電中は赤色ランプが点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。



### 商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	温熱アタッチメント
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約2.5W(充電時)
加熱温度	約55℃
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
電池容量	300mAh
本体寸法	約46×46×63mm
化粧箱寸法	約48×48×65mm
重量	本体:約34g
使用環境	環境温度5℃~40℃/相対湿度80%RH
セット内容	本体×1/USB充電コード×1/取扱説明書×1
製品素材	本体:ABS、アルミニウム合金
生産国	中国